

# Maxi Move®



Der Maxi Move wurde entwickelt, damit eine einzelne Pflegekraft anspruchsvolle tägliche Transfers sowie Positionierungstätigkeiten von Patienten oder Bewohnern durchführen kann. Es handelt sich um eine vielseitige Lösung, die auf einer Vielzahl an Aufhängungen an die verschiedenen Anforderungen beim Transfer von Pflegebedürftigen angepasst werden kann.

## ARJO-MOBILITÄTSGALERIE



D



E

© Arjo 2019

**D.** Ist nicht in der Lage, das eigene Gewicht auf den Füßen zu tragen. Kann mit ausreichender Unterstützung sitzen.

**E.** Hat Schwierigkeiten, eine sitzende Haltung beizubehalten; bleibt deshalb liegen/ teilweise im Bett liegen; kann nur in einem speziellen Pflegerollstuhl sitzen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

- **Stabiles Anheben**

Die stabile vertikale Hebebewegung hält den Patienten/Bewohner in einem gleichmäßigen Abstand zum Mast und in einer stabilen Position während des Anhebens bzw. des Transfers.

- **Präzisionstransfers**

Das Elektrische Dynamische Positionierungssystem (PDPS) erleichtert die Positionierung des Pflegebedürftigen im Gurt und minimiert das manuelle Bewegen.

- **Vielseitigkeit**

Die Möglichkeit, Aufhängungen auszutauschen, bietet Pflegekräften ein flexibles System, bei dem sie zudem aus einem umfassenden Sortiment an Körpergurten wählen können.

- **Breiter Hubbereich**

Ein Teleskopmast mit Doppelfunktion bietet einen breiten Hubbereich zum Anheben auf Betten und zur Bodenaufnahme. Er kann zudem mit einem verlängerten Ausleger kombiniert werden.

- **Flexibles System mit verschiedenen Optionen**

Mit optional bestellbarer Waage erhältlich, sowie drei Lenkrollengrößen, einschließlich extra niedriger Rollen, um den Zugang unter niedrigen Betten sowie Patiententransportern zu erleichtern.

# Ausstattungsmerkmale

## COMBI-TRAGEVORRICHTUNG

Die Combi-Tragevorrichtung ermöglicht einen reibungslosen und einfachen Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufhängungen und der Liegendaufhängung.

## PDPS (ELEKTRISCHES DYNAMISCHES POSITIONIERUNGSSYSTEM)

Das Elektrische Dynamische Positionierungssystem (PDPS) minimiert manuelles Eingreifen und verbessert die Genauigkeit bei der Positionierung des Patienten/Bewohners.

## LENKROLLENGRÖSSE

Es sind drei Lenkrollengrößen erhältlich: Standard, niedrig und extra niedrig, um den Zugang unter niedrigen Betten und Transportliegen zu erleichtern.



## DUALES BEDIENFELD

Bedienfelder an der Säule und der Handbedienung. Die Pflegekraft kann die Handbedienung verwenden und so nahe am Patienten/Bewohner bleiben und während des gesamten Hebe- und Transfervorgangs guten Augenkontakt halten.

## WAAGE (OPTIONAL)

Eine optional integrierte Waage unterstützt einen effizienten Wiegevorgang.

## VERTIKALE TELESKOPSÄULE

Die vertikale Säule bietet Stabilität, während der Patient/Bewohner angehoben wird.


## PRODUKTINFORMATIONEN

Max. sichere Arbeitslast (SAL)	227 kg
Max. sichere Arbeitslast (SAL), wenn mit verlängertem Ausleger ausgestattet	130 kg
Liftermgewicht (mit Aufhängung und Akku)	70 kg
Maximale Hubhöhe	1575 mm
Minimale Hubhöhe	225 mm
Hubbereich	1350 mm
Min. Höhe bei Lagerung	1402 mm
Äußere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	718 mm
Äußere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1196 mm
Innere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	578 mm
Innere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1074 mm
Abstand des Fußes zum Boden (oberer Rand der Fußausleger zum Boden)	115 mm 101 mm 57 mm
Freiraum unter dem Fahrgestell (Boden bis Unterseite des Gestells)	25 mm 19 mm
Liftermlänge	1118 mm
Wendekreisdurchmesser	1222 mm
Schutzart Lifter	IPX4
Handbedienung, Schutzart	IPX7
Akku	24 V, 4 Ah
Akku-Ladeanzeige	
Betriebsstundenzähler – zeigt die Gesamtbetriebszeit an (Stunden)	
Not-Aus-Schalter und Notablass	
Automatische Sicherheitsabschaltung beim Absenken auf ein Hindernis	
Leichtgängige Lenkrollen, die beiden hinteren mit Feststellbremsen	

## ZUBEHÖR

- Eine große Auswahl an Aufhängungen
- Großes Angebot an Körpergurten und patientenspezifischen Gurten (Flites)
- Möglichkeiten für den Liegendtransfer
- Optional: verlängerter Ausleger, Waage, niedrige Lenkrollen
- Arjo-Desinfektionsmittel

## PLATZBEDARF

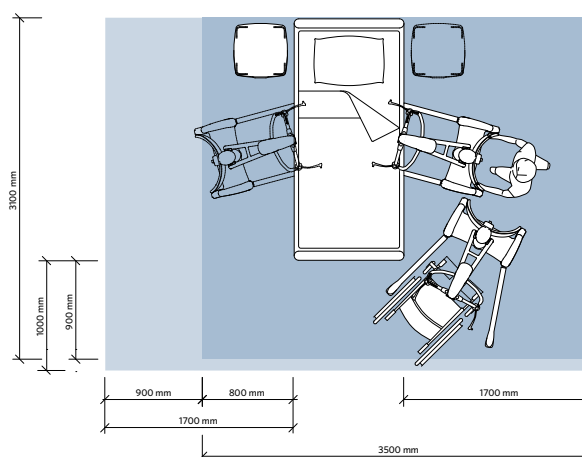

- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsbereich, damit die Pflegekraft die Steh- und Aufrichthilfe auf ergonomische Weise von einer Seite benutzen kann.
- Der hellblau gefärbte Bereich zeigt die zusätzlich benötigte Fläche, wenn an beiden Seiten ausreichend Platz zum Arbeiten und Bewegungen für Bewohner/Patient, Steh- und Aufrichthilfe und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.